

Stymulator AB MULTI SHAPER

PL

Model Nr: UK-015

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Ważne:

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi. W ten sposób można lepiej zrozumieć zasadę działania produktu, co pozwoli na jego najefektywniejsze użytkowanie. Zostałeś właścicielem jednego z najbardziej prostych w obsłudze i przyjaznych dla użytkownika urządzeń dostępnych na rynku.

Sposób użycia:

Bez większego wysiłku kształtuj i wzmacniaj mięśnie brzucha używając urządzenia przez kilka minut dziennie. Stymulator wykorzystuje specjalnie opracowaną technologię EMS (elektryczna stymulacja mięśni). Codzienne, regularne używanie urządzenia umożliwia kształtowanie różnych partii mięśni, osiągamy podobny efekt jak w przypadku połączenia ćwiczeń mięśni i ich regeneracji. Jest to urządzenie przenośne i bezprzewodowe, można go używać kiedykolwiek i gdziekolwiek. Charakteryzuje się prostym sposobem mocowania do ciała przy pomocy żelowych podkładek mocujących. Proste sterowanie: 6 programów i 10 poziomów intensywności impulsów.

Jak działa AB Multi Shaper:

Jednostka AB Multi Shaper wykorzystuje do napinania i rozluźniania (ćwiczenia) mięśni delikatne impulsy elektryczne. Urządzenie nie wibruje ani nie wydaje dźwięków. AB Multi Shaper oddziałuje na przednie, tylne i boczne partie mięśni jednocześnie i w ten sposób umożliwia szybsze osiągnięcie pożądaných efektów. Przed uruchomieniem urządzenia przymocuj go za pomocą żelowych podkładek do tej części ciała, którą chcesz stymulować. Po załączeniu urządzenia będziesz odczuwać delikatne mrowienie. Naciskając odpowiednie przyciski wybierasz program oraz nastawiasz intensywność impulsów elektrycznych. Nie wolno zaginać podkładek przewodzących. Skóra powinna być sucha, gdy pojawi się pot może dojść do odklejenia się podkładek żelowych. Jeżeli do tego dojdzie, należy wysuszyć skórę a podkładki przepłukać w letniej wodzie. Po wykonaniu tych czynności można kontynuować pracę z urządzeniem.

Jak osiągnąć najlepsze rezultaty:

AB Multi Shaper wzmacnia także mięśnie, których prawdopodobnie nigdy wcześniej nie ćwiczyłeś. AB Multi Shaper naprawdę spełnia swoje zadanie. Głównym kluczem do sukcesu jest konsekwencja. Używaj AB Multi Shaper codziennie przez kolejnych 30 dni. Tak samo jak nie można oczekiwać, że po pierwszej wizycie na siłowni Twoje mięśnie będą krzepkie, musisz przygotować się na to, że minie trochę czasu zanim przyzwyczaisz się do regularnych używania stymulatora i znajdziesz prawidłowy sposób wykonywania ćwiczeń. Większość użytkowników dostrzega widoczne efekty po około 4 tygodniach, więc usiądź, odpręż się i pozwól AB Multi Shaper pracować za Ciebie. Użytkowanie tego urządzenia jest proste, przyjemne, bardzo skuteczne i daje wiele korzyści. Doskonały rezultat można osiągnąć łącząc działanie stymulatora z ćwiczeniami.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Chociaż AB Multi Shaper jest bezpieczny w użyciu a jego obsługa jest bardzo prosta, producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienia oraz szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu. Zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz skonsultowanie z lekarzem możliwości korzystania z urządzenia, jeśli odnosi się do Ciebie co najmniej jeden z poniższych punktów:

- jesteś po porodzie,
- masz wszczepiony rozrusznik serca lub inne podobnie działające urządzenie,

- jesteś epileptykiem,
- cierpisz na stwardnienie rozsiane,
- cierpisz na zapalenie żył w aktywnej postaci,
- cierpisz na zapalenie tkanki miękkiej związane z chorobą lub zranieniem,
- masz świeże blizny lub jeśli jesteś po operacji,
- masz żylaki w późnym stadium choroby.

Nie należy używać urządzenia do masażu mięśni brzucha w trakcie menstruacji..

Sposób użycia:

1. Otwórz komorę baterii (zob. rys.1).
2. Włóż 2 szt. baterii 1,5 V typu AAA (zwróć uwagę na prawidłową biegunowość) (zob. rys. 2).
3. Przymocuj jednostki stymulujące wykorzystując do tego zatrzaski (zob. rys. 3 i 5).
4. Zdejmij folię ochronną z podkładek żelowych (zob. rys. 4).
5. Wykorzystując podkładki żelowe, przymocuj stymulacyjne jednostki AB Multi Shaper w wybranych miejscach (zob. rys. 6).

Wskazówka: Jednostka z 6 podkładkami jest przeznaczona do stymulacji mięśni brzucha. Jednostki z dwoma podkładkami są przeznaczone do stymulacji mięśni ramion, nóg i pośladków.



ON = załączyć, INC = zwiększ intensywność

OFF = wyłączyć, DEC = zmniejsz intensywność


PROGRAM = wybór programu

Sterowanie:

Przy pomocy przycisków sterujących możesz wybrać 1 z 6 trybów stymulacji (A do F) i dla każdego z nich 1 z 10 stopni intensywności (sygnalizuje to zapalanie się lampek 1 do 4).

Wskazówka: Po wybraniu trybu i intensywności, stymulacja jest aktywna przez ok. 12 min. Stymulację można przerwać w dowolnym momencie naciskając przycisk OFF.

PROGRAM

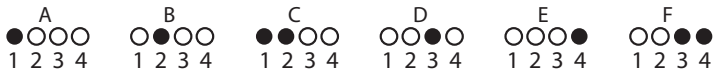

Czyszczenie i przechowywanie:

Do czyszczenia nie wolno używać chemicznych ani ściernych środków czyszczących. Poszczególne elementy można przetrzeć szmatką nasączoną letnią wodą. Szczególną uwagę należy skupić na utrzymywaniu w czystości podkładek żelowych. Po ich zabrudzeniu (kurzem, włoskami itp.) dochodzi do obniżenia intensywności przylegania do skóry. Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Jeżeli urządzenia nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

Zawartość opakowania:

- 1 szt. – jednostka z 6 podkładek żelowymi
- 2 szt. – jednostka z 2 podkładek żelowymi
- 3 szt. - jednostka sterująca

Parametry techniczne:

Zasilanie pojedynczej jednostki: 2 szt. baterii 1,5 V typu AAA (nie są dostarczane z produktem).
Częstotliwość: 1 do 100 Hz
Czas pracy: ok. 12 min.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłyby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów używających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunków atmosferycznych, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.