
MINIATUROWY APARAT SŁUCHOWY

Instrukcja obsługi



A. Bateria


Otwórz pokrywę komory baterii (czubkiem palca) włóż jedną baterię 1,4V, typu A312 (rysunek 1). Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Zamknij pokrywę.

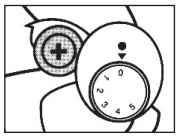

Uwaga:
- Baterie trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Baterii nie wolno ładować.
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia.
- Taśmę zabezpieczającą usuń dopiero bezpośrednio przed użyciem.


B. Przycisk ON/OFF

Pokrywa komory baterii spełnia również rolę wyłącznika. Na pokrywie znajdują się dwa rowki (rysunek 2). Gdy pokrywa jest całkowicie zamknięta – urządzenie jest załączone. Gdy pokrywa jest dosunięta to pierwszego rowka – urządzenie jest wyłączone.

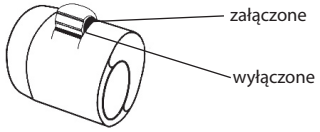

C. Regulacja głośności (5 poziomów)

Głośność zwiększa się przekręcając pokrętło w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (rysunek 3).ść. Zamknij pokrywę.

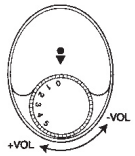

Przed założeniem aparatu zalecamy ustawianie poziomu głośności na najniższą wartość pa następnie zwiększanie jej, aż do osiągnięcia pożądanego poziomu.

D. Prawidłowy sposób użycia

1. Zamknij pokrywę komory baterii – urządzenie jest załączone. Ustaw głośność na najniższą wartość.
2. Wybierz z 3 dostarczonych nakładek higienicznych tą, która najlepiej pasuje do Twojego ucha tak, aby przewód słuchowy był dobrze uszczelniony. Jeżeli końcówka aparatu nie uszczelni przewodu słuchowego, może dochodzić do interferencji dźwięku. Interferencja wywołuje nieprzyjemne piski w słuchawce.


MINIATUROWY APARAT SŁUCHOWY

Instrukcja obsługi



A. Bateria


Otwórz pokrywę komory baterii (czubkiem palca) włóż jedną baterię 1,4V, typu A312 (rysunek 1). Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Zamknij pokrywę.

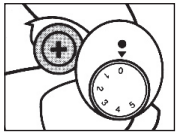

Uwaga:
- Baterie trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Baterii nie wolno ładować.
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia.
- Taśmę zabezpieczającą usuń dopiero bezpośrednio przed użyciem.


B. Przycisk ON/OFF

Pokrywa komory baterii spełnia również rolę wyłącznika. Na pokrywie znajdują się dwa rowki (rysunek 2). Gdy pokrywa jest całkowicie zamknięta – urządzenie jest załączone. Gdy pokrywa jest dosunięta to pierwszego rowka – urządzenie jest wyłączone.

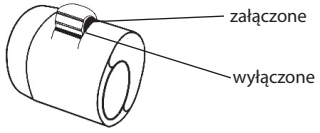

C. Regulacja głośności (5 poziomów)

Głośność zwiększa się przekręcając pokrętło w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (rysunek 3).ść. Zamknij pokrywę.

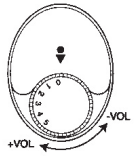

Przed założeniem aparatu zalecamy ustawianie poziomu głośności na najniższą wartość pa następnie zwiększanie jej, aż do osiągnięcia pożądanego poziomu.


D. Prawidłowy sposób użycia

1. Zamknij pokrywę komory baterii – urządzenie jest załączone. Ustaw głośność na najniższą wartość.
2. Wybierz z 3 dostarczonych nakładek higienicznych tą, która najlepiej pasuje do Twojego ucha tak, aby przewód słuchowy był dobrze uszczelniony. Jeżeli końcówka aparatu nie uszczelni przewodu słuchowego, może dochodzić do interferencji dźwięku. Interferencja wywołuje nieprzyjemne piski w słuchawce.

3. Włóż urządzenie do przewodu słuchowego tak, aby końcówka aparatu była porządnie wsunięta do przewodu słuchowego (rysunek 4).



4. Czubkiem palca nastaw głośność na porządnym poziomie (rysunek 5).

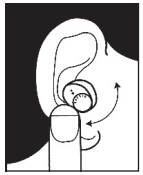


Zwróć uwagę na to, żeby nie zakryć aparatu palcem. Przykrywając aparat usłyszysz wysoki, piskliwy dźwięk.

5. Po skończeniu użytkowania przesuń pokrywę komory baterii w pozycję OFF (zob. rysunek 2).


Po 24 godzinach ciągłego używania, poziom głośności będzie się obniżać. Zalecamy wtedy ustawić większy pozom głośności lub wymienić baterię na nową (w przypadku, gdy dźwięk jest słaby a głośność jest ustawiona na wysokim poziomie).

E. Konserwacja

1. Do czyszczenia i usuwania woskowiny z urządzenia używaj delikatnej szczoteczki – ułatwia czyszczenie. W ten sposób zapobiegasz gromadzeniu się woskowiny na końcówce urządzenia (rysunek 6).

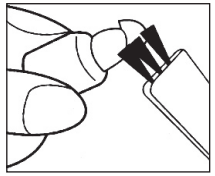

2. Do usuwania woskowiny z otworu w końcówce urządzenia używaj plastikowego przyrządu do czyszczenia z metalowym drucikiem (rysunek 7).

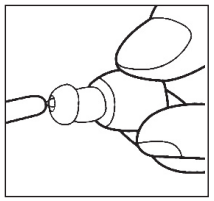

Do czyszczenia nie wolno używać wody. Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą.

F. Ważne ostrzeżenia

1. Urządzenie nie jest wodoodporne, dlatego nie można dopuścić do jego kontaktu z wodą. Jeżeli przypadkowo dojdzie do zamoczenia, wyłącz urządzenie, wyjmij z niego baterię i dokładnie wysusz.
2. Głośność zwiększaj stopniowo do osiągnięcia odpowiedniego poziomu.
3. Produkt ten nie jest urządzeniem medycznym. Możliwość korzystania z urządzenia skonsultuj z lekarzem specjalistą.
4. Zawsze trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dane techniczne

Żywotność baterii 24 godziny eksploatacji (1 szt. A312)

Prąd znamionowy 5-8 mA

Zużycie energii 10 mW

Zakres częstotliwości 50-12KHz +/-2,5 dB

Poziom głośności > 35 dB


Czułość - 8 dB

Masa (łącznie z baterią) – 3,2 g

3. Włóż urządzenie do przewodu słuchowego tak, aby końcówka aparatu była porządnie wsunięta do przewodu słuchowego (rysunek 4).



4. Czubkiem palca nastaw głośność na porządnym poziomie (rysunek 5).

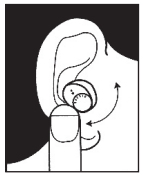


Zwróć uwagę na to, żeby nie zakryć aparatu palcem. Przykrywając aparat usłyszysz wysoki, piskliwy dźwięk.

5. Po skończeniu użytkowania przesuń pokrywę komory baterii w pozycję OFF (zob. rysunek 2).


Po 24 godzinach ciągłego używania, poziom głośności będzie się obniżać. Zalecamy wtedy ustawić większy pozom głośności lub wymienić baterię na nową (w przypadku, gdy dźwięk jest słaby a głośność jest ustawiona na wysokim poziomie).

E. Konserwacja

1. Do czyszczenia i usuwania woskowiny z urządzenia używaj delikatnej szczoteczki – ułatwia czyszczenie. W ten sposób zapobiegasz gromadzeniu się woskowiny na końcówce urządzenia (rysunek 6).

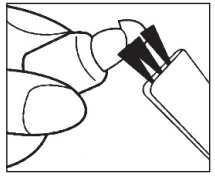

2. Do usuwania woskowiny z otworu w końcówce urządzenia używaj plastikowego przyrządu do czyszczenia z metalowym drucikiem (rysunek 7).

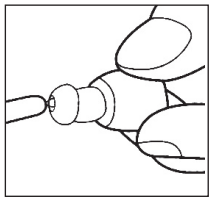

Do czyszczenia nie wolno używać wody. Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą.

F. Ważne ostrzeżenia

1. Urządzenie nie jest wodoodporne, dlatego nie można dopuścić do jego kontaktu z wodą. Jeżeli przypadkowo dojdzie do zamoczenia, wyłącz urządzenie, wyjmij z niego baterię i dokładnie wysusz.
2. Głośność zwiększaj stopniowo do osiągnięcia odpowiedniego poziomu.
3. Produkt ten nie jest urządzeniem medycznym. Możliwość korzystania z urządzenia skonsultuj z lekarzem specjalistą.
4. Zawsze trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dane techniczne

Żywotność baterii 24 godziny eksploatacji (1 szt. A312)

Prąd znamionowy 5-8 mA

Zużycie energii 10 mW

Zakres częstotliwości 50-12KHz +/-2,5 dB

Poziom głośności > 35 dB

Czułość - 8 dB

Masa (łącznie z baterią) – 3,2 g