INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PODPÓRKA DWUKOŁOWA Z SIEDZISKIEM

Nr katalogowy:	**RF-651**
Max. bezpieczne obciążenie:	113 kg
Regulacja wysokości uchwytów:	78-98 cm
Całkowita szerokość:	55 cm
Głębokość:	52 cm
Waga:	5 kg



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z podpórki należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Balkonik przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu lub z problemem pionizacji. Podpórka przeznaczona jest do pomocy dla osób, które wymagają wsparcia podczas chodzenia, w przypadku zmęczenia zapewnia także możliwość spoczynku. Może być użytkowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Pomaga w codziennych czynnościach, np. wstawaniu z łóżka, chodzeniu, korzystaniu z toalety, spacerze, zakupach.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Zawsze przed użyciem podpórki upewnić się, że jest on prawidłowo zablokowana w pozycji rozłożonej.
2. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia podpórki.
3. Nie przewozić na siedzisku elementów mocno wystających poza jego obszar, ponieważ może to wpłynąć na stabilność podpórki.
4. Podczas korzystania z podpórki zawsze zachować wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
5. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie podpórki w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
6. Korzystanie z podpórki w środowisku o dużej wilgotności (prysznic, basen itp.) może wywołać korozję jego ruchomych elementów, co w efekcie może spowodować jej uszkodzenie.
7. Nie korzystać z podpórki podczas chodzenia po schodach oraz schodach ruchomych.
8. Nie przechować podpórki w temperaturze poniżej 0°C. Nie wystawiać podpórki na długi czas w temperaturze powyżej 40°C, ponieważ może to spowodować przegrzanie elementów podpórki i poparzenie użytkownika.
9. Zawsze należy przestrzegać minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej wysokości rur przesuwnych.
10. Nie wieszaj toreb ani worków na uchwytach - niebezpieczeństwo przewrócenia!
11. Użyj hamulca głównego na stromych powierzchniach.
12. Nigdy nie używaj podpórki do poruszania się, gdy jest złożona!
13. Jeśli zbyt mocno oprzesz się o uchwyty, podpórkę może przechylić się do tyłu.
14. Używanie podpórki do celów innych niż chodzenie, takich jak transport ciężkich ładunków, jest nieodpowiednie i niebezpieczne.
15. Stosować na różnych i twardych powierzchniach.
16. Nie stosować jako zamiennik wózka inwalidzkiego.
17. Nie używać na pochyłym terenie.

UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

UWAGA! Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu ustalenia odpowiedniego sposobu korzystania z podpórki, zgodnie z Twoimi możliwościami funkcjonalnymi i czynnościami dnia codziennego.


UWAGA! Poniższa informacja to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub rehabilitantem.

UWAGA! Jeżeli podpórka jest prawidłowo wyregulowana, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi stawami łokciowymi, wówczas podczas chodzenia część ciężaru ciała przejmuje podpórka.

ELEMENTY PODPÓRKI

Elementy podpórki są przedstawione na rys. nr 1.

rys. 1

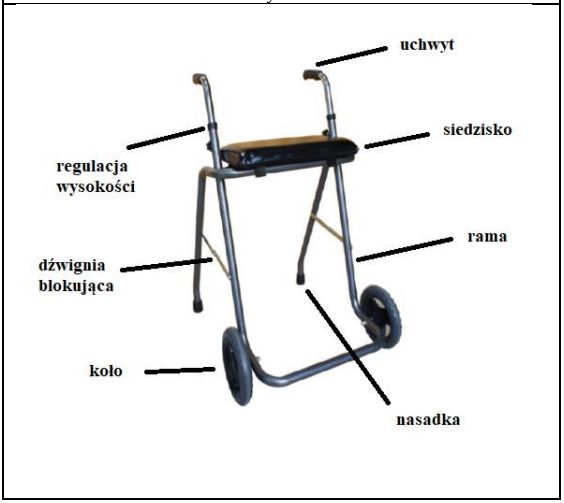

Montaż podpórki:

1. Podpórka jest dostarczana w pełni wyregulowana i zmontowana z wyjątkiem uchwytów do prowadzenia.
2. Dopasuj rączki do pionowych rurek ramy podpórki:
   - Włóż rurkę rączki do otworu (odpowiadającego jej wielkością) w pionowej rurce ramy podpórki.
   - Umieść rączkę na żądanej wysokości i zakręć pokrętło na odpowiednim otworze.
   - Sprawdź czy rączka jest prawidłowo zabezpieczona. Powtórz czynność z drugą rączką.

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE PODPÓRKI

Aby rozłożyć:

1. Chwyć przednią ramę podpórki jedną ręką i tylną, ruchomą ramę drugą ręką i odciągnij je od siebie.
2. Zablokuj rozłożoną ramę podpórki poprzez pchnięcie do dołu dźwigni blokującej znajdującej się po bokach podpórki. Upewnij się, że do końca zamknąłeś dźwignię blokującą.
3. Obróć siedzisko aż do zablokowania na ogranicznikach tak, aby znalazło się w pozycji równoległej do podłogi, miękką częścią do góry.

Aby złożyć:

1. Odchyl siedzisko.
2. Pociągnij do góry dźwignię blokującą znajdującą się po bokach podpórki.
3. Złap za przednią ramę podpórki jedną ręka i tylną, ruchomą ramę drugą ręką a następnie przyciągnij je możliwie najbliżej siebie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę podpórki pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
   - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
   - śruby są prawidłowo dokręcone;
   - pokrętła prawidłowo zabezpieczają ustawioną wysokość rączek;
   - żadne inne części podpórki nie są poluzowane lub uszkodzone.

UWAGA! Jeśli zachodzi taka konieczność, należy wymienić lub wyregulować odpowiednie części. W razie potrzeby należy nasmarować części mechaniczne.

UWAGA! Zaleca się regularne czyszczenie podpórki miękką szmatką i wodą z mydłem. Podpórka po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką. Do czyszczenia podpórki nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających. Urządzenie można dezynfekować alkoholem lub pochodnymi, ale o niskim stężeniu.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	Żelazo
Koła	EVA (polietylen-co-octan winylu) + PP (polipropylen)
Uchwyty	PVC (polichlorek winylu)
Siedzisko	PVC (polichlorek winylu) + gąbka + drewno
Dźwignia blokująca	Żelazo
Nasadki	Guma

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie





REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl

Wer. 1.2
Wydano: 02/2021

NOTATKI

KARTA GWARANCYJNA
PODPÓRKA DWUKOŁOWA Z SIEDZISKIEM

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczątka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Podpórka jest objęta 12 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że sprzęt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
    - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisane w instrukcji użytkowania;
    - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
    - mechaniczne i termiczne uszkodzenia np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
    - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis)

Lp.	**Data zgłoszenia**	**Nr zlecenia**	**Opis wady/ Zakres naprawy**	**Data wykonania naprawy**	**Pieczęć i podpis serwisu**
1.					
2.					