
REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa
www.rehafund.pl
tel. (22) 59 40 300
fax (22) 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Poduszka pneumatyczna BioFlote™ 1 PLUS

⚠ **UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z poduszki należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.**

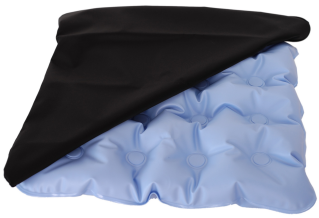

Maksymalna waga użytkownika: 130kg

PRZEZNACZENIE

3-warstwowa poduszka pneumatyczna BioFlote™ 1 została zaprojektowana dla ludzi spędzających dużo czasu w pozycji siedzącej, w szczególności dla osób z ryzykiem powstania odleżyn.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Należy zadbać o to, aby poduszka leżała na pewnym podparciu.
2. Nie należy dopuszczać do kontaktu poduszki z ostrymi przedmiotami mogącymi naruszyć jej powłokę.
3. Poduszkę należy wypełnić odpowiednio dobraną ilością powietrza do wagi pacjenta, tak aby stabilizowała pozycję pacjenta i nie dopuszczała do kontaktu miednicy z podłożem, a jednocześnie nie wywierała zbyt dużego nacisku na ciało.
4. Poduszkę należy trzymać z dala od źródła ognia i gorąca.
5. Poduszki nie należy wyginać, jeżeli jest napełniona powietrzem.
6. Poduszkę należy przechowywać w suchym środowisku. Poduszka nie może być narażona na długotrwały kontakt z wilgocią.
7. Aby uniknąć ryzyka powstania odleżyn, obserwuj skórę na pośladkach pacjenta i w przypadku pojawienia się zaczerwienienie skonsultuj się z lekarzem.
8. W celu uniknięcia zakażeń krzyżowych produkt przeznaczony jest do dla jednego użytkownika.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Poduszka
2. Pokrowiec na poduszkę
3. Instrukcja obsługi

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem:

1. Wyjmij poduszkę z opakowania.
2. Sprawdź, czy opakowanie zawierało:
    a. Poduszkę pneumatyczną
    b. Czy poduszka posiada wentyl do nadmuchiwania
    c. Pokrowiec
    d. Instrukcje użytkowania
3. Sprawdź, czy poduszka nie posiada, żadnych widocznych uszkodzeń

4. Upewnij się, że krzesło lub wózek na którym będzie siedział użytkownik jest wystarczająco wytrzymały, aby utrzymać jego wagę.

Użytkowanie:


1. Wyjmij poduszkę z opakowania
2. Napompuj poduszkę ustami do ciśnienia które będzie komfortowe dla użytkownika (rys.1)
3. Włóż poduszkę w pokrowiec (rys.2)
4. Umieść poduszkę na miejscu, gdzie będzie siedział użytkownik (rys.3)



Rysunek 1



Rysunek 2

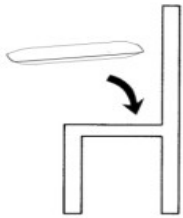

Rysunek 3

Poduszka nie może być napompowana za mocno tak, aby pacjent siedział na samym jej czubku, lub za słabo tak, aby pacjent dotykał pośladkami siedziska. (rys.4).



Rysunek 4

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Poduszka

1. Poduszkę należy czyścić za pomocą mydła bakteriobójczego i wody.
2. Po umyciu poduszkę należy dokładnie wysuszyć za pomocą bawełnianej szmatki.

⚠ **UWAGA! Do suszenia poduszki nie wolno używać żadnych urządzeń grzewczych jak np. suszarka czy kaloryfer. Poduszki nie można prać w pralce ani suszyć w suszarce. Poduszki nie można sterylizować w autoklawie.**

Pokrowiec

1. Pokrowiec można prać w pralce w temperaturze 30^0C

⚠ **UWAGA! Pokrowca nie można prasować. Pokrowiec powinien być używany tylko przez jedną osobę.**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIARY	*WAGA*	*MAKS. OBCIĄŻENIE*
40 cm(szer.) x 40 cm (dł.) x 5.5 cm (wys.)	*198 g*	*130 kg*

WYTWÓRCA:

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03–310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00,
fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl

CE

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa
www.rehafund.pl
tel. (22) 59 40 300
fax (22) 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl

KARTA GWARANCYJNA
Poduszka pneumatyczna BioFlote™ 1 PLUS

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczątka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma REHA FUND zapewnia Nabywcę, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy i dobrej jakości.
2. Czas gwarancji trwa 12 miesięcy i liczy się od daty zakupu przez Nabywcę.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie produktu czystego, kompletnego z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT). Brak dokumentów lub dostarczenie zanieczyszczonego produktu powoduje zawieszenie lub odmowę rozpatrzenia reklamacji.
4. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie w jak najkrótszym czasie, nie dłużej niż 14 dni od momentu dostarczenia towaru do serwisu. W przypadku sprowadzenia części z zagranicy potrzebnych do naprawy, okres ten może się przedłużyć, o czym reklamujący zostanie poinformowany.
5. Serwis ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej, gdy karta gwarancyjna jest nieczytelna lub jakiekolwiek dane zostały zmienione lub poprawione.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwowania i przechowywania oraz wynikłe ze zdarzeń losowych.
7. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia (produkt sprawny) lub gdy uszkodzenia powstały z winy użytkownika, wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji ponosi reklamujący.
8. Dokonywanie jakichkolwiek napraw czy modyfikacji bez zgłoszenia do autoryzowanego serwisu powoduje natychmiastową utratę praw gwarancyjnych.
9. Reklamacje należy zgłosić bezpośrednio do punktu sprzedaży lub do firmy REHA FUND ul. Staniewicka 14, 03–310 Warszawa, tel.: 22/594-03-00 w godz. 8:00-16:00. Firma Reha Fund prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
11. Niniejsza gwarancja nie ogranicza w żaden sposób, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień Nabywcy w stosunku do Sprzedawcy z tytułu roszczeń kontraktowych oraz ustawowych.

PRZEGLĄD/NAPRAWA **(wypełnia serwis)**

Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i Podpis Serwisu