PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO
REHA FUND
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, tel. 22 59 40 300, fax 22 59 40 307, www.rehafund.pl, info@rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
KULA ŁOKCIOWA



Nr kat.: **RF-220**
Max. bezpieczne obciążenie: 113 kg
Regulacja wysokości: 73,6 cm – 96,5 cm
Waga: 0,62 kg


UWAGA!
Przed rozpoczęciem korzystania z kuli, należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE
Kule łokciowe przeznaczone są do poruszania się, asekuracji podczas chodzenia, do podpierania się, utrzymania równowagi i przenoszenia ciężaru ciała w przypadkach schorzeń urazowo – ortopedycznych kończyn dolnych przy zakazie pełnego obciążenia kończyny. Przeznaczone dla pacjentów po kontuzjach, wypadkach, złamaniach, skręceniach, zwichnięciach, seniorów.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.
2. Podczas korzystania z kuli zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
3. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie kuli w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
4. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

REGULACJA WYSOKOŚCI

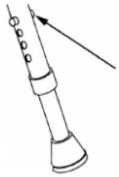

Aby wyregulować kulę na pożądaną wysokość należy:

- wcisnąć przycisk zwalniający na dole kuli i lekko przekręcić dolną rurkę;
- ustawić pożądaną wysokość;
- obrócić dolną rurkę tak, aby przycisk zablokował się w otworach;

Należy dokładnie sprawdzić czy przycisk jest zablokowany w otworach.

UWAGA!
Poniższe zalecenia to zalecenia producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub rehabilitantem.

Wysokość kuli powinna być tak dopasowana do użytkownika, aby mógł on zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętą nogą w stawie kolanowym. Rękojeść powinna być wyregulowana tak, aby ręka pozostawała lekko zgięta w stawie łokciowym a właściwy ciężar ciała opierał się na rękach a nie na dołach pachowych.

CZYSZCZENIE
1. Części z tworzywa należy czyścić tylko ciepłą wodą z dodatkiem mydła.
2. Części metalowe należy czyścić suchą szmatką.


UWAGA!
Do czyszczenia kuli nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających.

KONSERWACJA
Zaleca się regularną kontrolę kuli, aby upewnić się czy:

1. nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
2. przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość;
3. otwory w rurce nie są powiększone lub wydłużone;
4. nie ma luzów na rękojeści i wsporniku pachowym;
5. dolna nasadka nie uległa zużyciu – jeżeli tak, należy ją wymienić.

UWAGA!
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przydatności kuli do użycia skontaktuj się z serwisem producenta.

ELEMENTY KULI

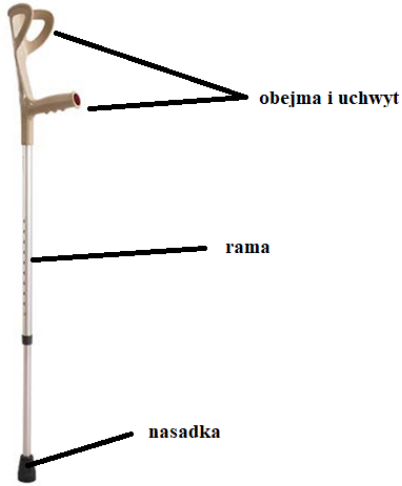

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	aluminium
Nasadka	guma bez lateksu
Uchwyt i obejma	PP (polipropylen)

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu

	Delikatne, obchodzić się ostrożnie

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl

Wer. 1.2
Wydano: 02/2021

NOTATKI

KARTA GWARANCYJNA
KULA ŁOKCIOWA

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczątka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Kula jest objęta 18 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że sprzęt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
    - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisane w instrukcji użytkowania;
    - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
    - mechaniczne i termiczne uszkodzenia np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
    - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis)

Lp.	**Data zgłoszenia**	**Nr zlecenia**	**Opis wady/ Zakres naprawy**	**Data wykonania naprawy**	**Pieczęć i podpis serwisu**
1.					
2.					