REHA FUND

REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa
www.rehafund.pl

tel. 22 59 40 300
fax 22 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PODPÓRKA DO MUSZLI RF-940



Max. bezpieczne obciążenie: 113 kg
Regulacja wysokości: 640 mm – 740 mm
Regulacja szerokości: 520 mm – 620 mm
Waga: 1,55 kg

⚠ **UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z podpórki należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.**

PRZEZNACZENIE

Podpórka przeznaczona jest do pomocy przy wstawaniu i siadaniu na toalecie dla osób z osłabioną ruchowością stawów.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Zawsze przed użyciem podpórki upewnić się, że jest ona prawidłowo złożona, zamocowana i zablokowana w miejscach, gdzie możliwa jest jej regulacja.
2. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia podpórki.
3. Podczas korzystania z podpórki należy zawsze zachować wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: opieranie ciężaru ciała tylko na jednej ze stron podpórki lub podpieranie się o elementy do tego nie przeznaczone.
4. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie podpórki w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
5. Nie przechować podpórki w temperaturze poniżej 0°C

⚠ **UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.**


MONTAŻ

1. Zdejmij mocowanie deski sedesowej z muszli.
2. Klamrę mocującą umieść pomiędzy muszlą a mocowaniem deski sedesowej tak, aby zaokrąglona cześć klamry znajdowała się z tyłu toalety.
3. Nałóż z powrotem deskę sedesową i przełóż śruby mocujące przez klamrę podpórki i muszlę. Załóż i dokręć nakrętki.
4. Rurki łączące włóż do zaokrąglonej części klamry tak, aby ramiona były skierowane do góry. Wciśnij przycisk blokujący i przesuń rurki łączące do wewnątrz klamry tak, aby przycisk zablokował się na żądanej pozycji.
5. Wyreguluj stopki podpórki za pomocą przycisku blokującego na odpowiednią dla toalety wysokość. Upewnij się, ze wszystkie przyciski blokujące, są dobrze zablokowane i że obie stopki ustawione są na tej samej wysokości.
6. Załóż ramiona podpórki na rurki łączące wciskając przycisk blokujący, tak aby zablokował się w otworze.
7. Upewnij się, że podpórka jest dobrze zamocowana i stabilna, a wszystkie jej elementy są połączone prawidłowo.

⚠ **UWAGA! Nie wszystkie rodzaje desek sedesowych nadają się do montażu podpórki. Upewnij się, że deska sedesowa jest montowana do sedesu za pomocą śrub.**

BUDOWA

1. Klamra
2. Rurki łączące
3. Ramiona
4. Stopki
5. Nasadki

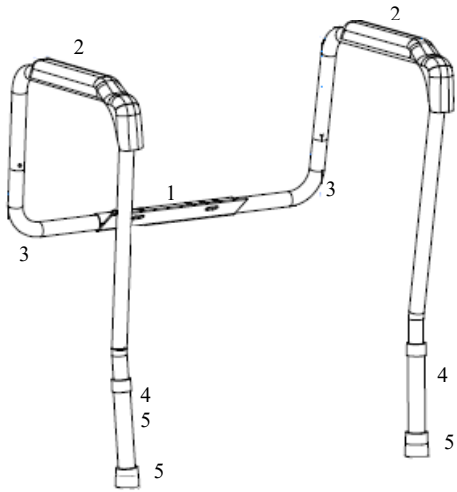

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zaleca się regularne czyszczenie podpórki miękką szmatką i wodą z mydłem. Podpórkę po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.

⚠ **UWAGA! Do czyszczenia podpórki nie wolno używać rozpuszczalników czy środków ścierających.**

GWARANCJA

Sprzęt objęty jest 12-miesięcznym okresem gwarancji. Sprzęt powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie obejmuje:

- czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisaną w instrukcji,
- części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania,
- mechanicznych i termicznych uszkodzeń sprzętu,
- usterek powstałych wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbań, dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

Do serwisu produkt należy dostarczyć czysty. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, Nabywca będzie obciążony kosztami realizacji reklamacji.
Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu.
Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYTWÓRCA:

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03–310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00,
fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

Wydano: 05/2015

CE